


Інструкція по веб-кабінету пацієнта


Додаткові відео інструкції та посилання на них, ви зможете знайти в кінці цього файлу.

Пацієнт що потребує реабілітації і для якого лікар створив акаунт може використовувати RGS за допомогою персонального комп'ютера та WEB- камери. Для цього потрібно перейти за посиланням <https://rgsweb.eodyne.com/global/os/> ввести логін і пароль що вам надав лікар.

Після входу пацієнту доступні вправи що їх призначив лікар

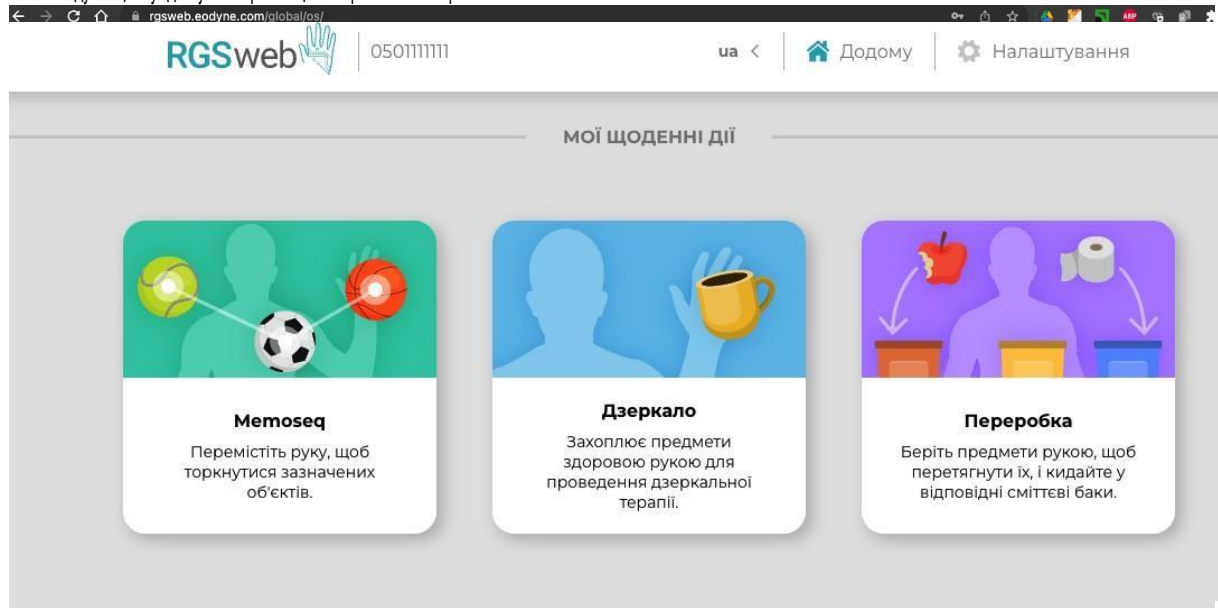

Пацієнт обирає вправу та надає дозвіл доступу до системи веб камери та мікрофона. На виконує вправи під чітким наглядом віртуального помічника. Який на Українській мові підказує та допомагає пацієнту виконувати вправи.

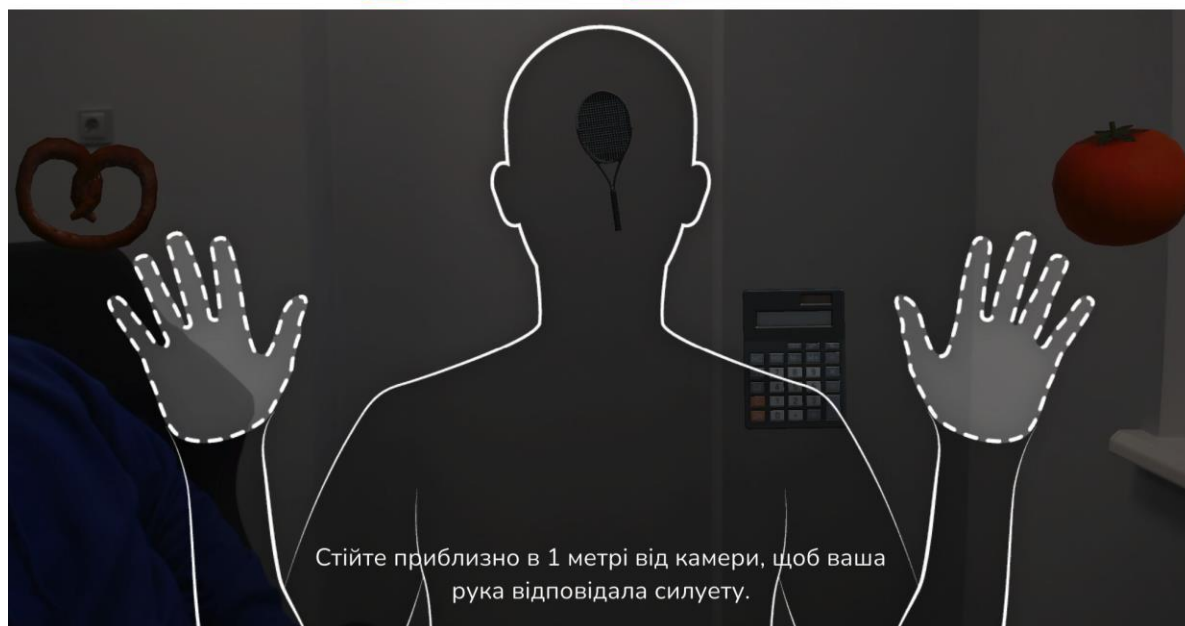

Приклад вправи в якій система фіксує руки в просторі та аналізує як пацієнт рухає руками під час виконання вправ. По закінченню вправи пацієнт отримує персональні бали оцінювання виконання вправ.

3 приводу питань та технічної допомоги звертайтеся до служби технічної підтримки продукту RGS +380634390602 Сергій або на пошту rgs.info.ua@ukr.net

Також ви можете переглянути відео інструкції за цими посиланнями:

- Мобільний додаток для пацієнта:

<https://youtu.be/0fWmzo-zR7U>

<https://youtu.be/a7garqIa6tY>

- Веб-кабінет пацієнта

<https://youtu.be/nzlumlw1h1I>